

# ALPINE WHITE




## WHITENING STRIPS



### Anwendung

Für ein optimales Zahnaufhellungsergebnis, empfehlen wir die Streifen während einer Woche einmal täglich für 1-2 Stunden auf zu tragen. Reinigen Sie 30 Minuten vor der Anwendung die Zähne gründlich.

1. Öffnen Sie den Beutel an der gekennzeichneten Stelle. Ziehen Sie die Streifen von der Folie ab.
2. Tragen Sie die Streifen mittig, dem Zahnfleisch entlang auf und stellen Sie sicher, dass diese fest sitzen. Klappen Sie den restlichen Teil der Streifen hinter die Zähne.
3. Entfernen Sie die Streifen nach der gewünschten Tragzeit. Reinigen Sie Ihre Zähne wenn nötig.

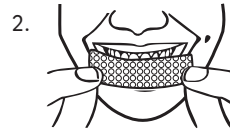

### Application

Pour un blanchiment optimal de vos dents, nous vous recommandons de porter les bandes une à deux heures par jour pendant une semaine. Nettoyez rigoureusement vos dents 30 minutes avant de placer les bandes.

1. Ouvrez le sachet à l'endroit indiqué. Enlevez les bandes du plastique.
2. Appliquez la bande au milieu, le long de la gencive, puis assurez-vous qu'elle soit bien fixée. Placez la partie restante de la bande derrière les dents.
3. Enlevez les bandes une fois le délai souhaité écoulé. Lavez-vous les dents si nécessaire.



### Modo d'uso

Per un risultato sbiancante ottimale vi raccomandiamo di applicare le strisce una volta al giorno per 1-2 ore per una settimana. Pulire accuratamente i denti 30 minuti prima dell'applicazione.

1. Aprire il sacchetto nel punto contrassegnato. Staccare le strisce dalla pellicola.
2. Applicare le strisce centralmente, lungo le gengive, assicurandosi che aderiscano perfettamente. Ripiegare la parte eccedente delle strisce dietro i denti.
3. Rimuovere le strisce una volta trascorso il tempo desiderato. Pulire i denti se necessario.

**ALPINE WHITE, professionelle Zahnaufhellung für Jedermann. Sichtbar weissere Zähne nach bereits 3 Anwendungen. Unsere Formel schützt Ihre Zähne und gibt ihnen ihr natürliches Weiss zurück.**

ALPINE WHITE entfernt zuverlässig hartnäckige Ablagerungen und Verfärbungen auf und unterhalb der Zahnoberfläche welche durch den Konsum von Kaffee, Tee, Wein, Tabakwaren oder anderen Lebens- und Genussmitteln entstanden sind.

Überzeugen Sie sich selbst und verführen Sie Ihr Gegenüber mit Ihrem neuen, strahlenden Lächeln.

### Anwendungshinweise

Auf den Konsum von Kaffee-, Tee-, Cola-Getränken und Rotwein sowie Tabakwaren sollte während der gesamten Anwendungszeit verzichtet werden, da dadurch die Zähne erneute Verfärbungen aufweisen können und das Aufhellungsergebnis gemindert werden kann. Achten Sie während der gesamten Anwendungszeit auf eine gute Mundhygiene.

Eine Anwendungsphase darf frühestens nach 1 Woche wiederholt werden. Die Streifen dürfen maximal 5 Stunden pro Tag getragen werden.

Die Anwendung kann eine vorübergehende Überempfindlichkeit der Zähne hervorrufen. Streifen dürfen nicht gekaut oder geschluckt werden. Streifen dürfen nicht verwendet werden bei: Zahngeschwüren, eingerissenem Zahnfleisch, bei Zahnfleischabszess, direkt nach einer Zahnoperation, bei Kariesbefall. Streifen dürfen nicht während der Schwangerschaft benutzt werden. Während der Anwendung darf nicht getrunken oder gegessen werden. Es können allergische Reaktionen auftreten.

Kronen, Veneers (Keramikverschalungen) oder Füllungen verändern bei der Anwendung ihren Farbton nicht.

Für weitere Informationen: [www.alpinewhite.ch](http://www.alpinewhite.ch)

**ALPINE WHITE, blanchiment des dents pour tout le monde. Des dents visiblement plus blanches dès 3 applications. Notre formule embellit vos dents et leurs redonne leur blanc naturel.**

ALPINE WHITE enlève scrupuleusement sur et sous la surface dentaire les dépôts et les tâches les plus tenaces qui résultent de la consommation de café, de thé, de vin, de tabac ou de tout autre aliment ordinaire ou denrée d'agrément.

Laissez-vous convaincre et séduisez votre entourage avec votre nouveau sourire rayonnant.

### Indications d'application

Il est conseillé d'éviter la consommation de café, de thé, de Coca-cola, de vin rouge et de tabac pendant l'ensemble de la période d'application. De ce fait, les dents pourraient comporter de nouvelles colorations et le résultat du blanchiment pourrait en être réduit. Veillez à avoir une bonne hygiène bucco-dentaire pendant l'ensemble de la période d'application.

Une phase d'application doit au plus tôt être réitérée après une semaine. Les bandes doivent être portées au maximum 5 heures par jour.

L'application peut susciter une hypersensibilité temporaire des dents. Les bandes ne doivent pas être mâchées ou avalées. Elles ne doivent pas être utilisées dans les cas suivants : abcès dentaires, gencive abîmée, abcès de la gencive, directement après une opération dentaire, carie. Ces bandes ne doivent pas être utilisées durant une grossesse. Durant l'application des bandes, il ne faut ni boire, ni manger. Des réactions allergiques pourraient survenir.

Les couronnes, veneers (recouvrements en céramique) ou plombages ne changent pas de couleur lors de l'application.

Pour plus d'informations: [www.alpinewhite.ch](http://www.alpinewhite.ch)

**ALPINE WHITE, sbiancamento dentale professionale per tutti. Denti visibilmente più bianchi già dopo tre applicazioni. La nostra formula è delicata sui denti e restituisce il loro bianco naturale.**

ALPINE WHITE rimuove in modo affidabile i depositi e le macchie ostinate sopra e sotto la superficie del dente dovute al consumo di caffè, tè, vino, tabacco o altri beni alimentari e voluttuari.

Provate personalmente e preparatevi a sedurre con un nuovo sorriso smagliante.

### Avvertenze sull'utilizzo

Per tutto il periodo di applicazione si dovrebbe rinunciare al consumo di caffè, tè, bevande alla cola e vino rosso nonché al tabacco, poiché queste sostanze potrebbero causare nuove macchie e ridurre l'efficacia dello sbiancamento. Per tutta la durata del trattamento prestare attenzione a una buona igiene orale.

Una fase di applicazione può essere ripetuta non prima che sia trascorsa almeno una settimana. Le strisce possono essere applicate al massimo per 5 ore al giorno.

L'applicazione può causare una temporanea sensibilità eccessiva dei denti. Le strisce non devono essere masticate o deglutite. Non utilizzare le strisce in caso di: accessi dentali, gengive tagliate, accessi gengivali, subito dopo un intervento ai denti, in presenza di carie. Le strisce non devono essere applicate in gravidanza. Durante l'applicazione non è consentito bere o mangiare. Possono manifestarsi reazioni allergiche.

Le capsule, le faccette (rivestimenti in ceramica) o le otturazioni non cambiano colore con l'applicazione.

Per ulteriori informazioni: [www.alpinewhite.ch](http://www.alpinewhite.ch)

Vertrieb durch:  
**Polyprom Handels AG**  
Talstrasse 36  
CH-8200 Schaffhausen

Importiert durch:  
coba GmbH  
Weiheracherstrasse 8  
CH-8114 Dänikon

  
DISCOVER YOUR SMILE